

REF 15S01BL | IsoDrapeS / REF 15S02BL | IsoDrapeS (selbstklebend/adhesive) | Gebrauchsanweisung /

Deutsch

Produkt: OP-Abdeckung und OP-Abdeckung (selbstklebend/adhesive)

Produktname: IsoDrapeS und IsoDrapeS (selbstklebend/adhesive)

Produktreferenz: REF 15S01BL und REF 15S02BL

Kategorisierung: Gemäß den Klassifizierungskriterien der MDD93 /42 /EWG, Anhang IX, ist dieses Medizinprodukt in die Klasse Is eingestuft. Das Produkt kommt als steriles Produkt in Anwendung.

Zweckbestimmung: OP-Abdeckungen sind zum Schutz des Patienten bestimmt, z. B. um die Stelle eines chirurgischen Einschnitts vor mikrobieller und anderer Kontamination zu schützen. Einmalige Verwendung.

Indikation: Geeignet für Menschen die sich einer Operation unterziehen

Kontraindikation: Keine

Bestimmungsgemäßer Anwender: Medizinisches Personal

Einsatz:

- Für den Einmalgebrauch geeignet
- Gebrauchte Abdeckungen gelten als kontaminiert
- Nicht reinigen oder desinfizieren
- Produkt ist steril

Meldung von Vorfällen: Im Falle von Nebenwirkungen oder schwerwiegenden Ereignissen während der Verwendung des Produkts wenden Sie sich an den Hersteller, den Importeur auf dem Etikett des Produkts oder an die örtlichen Behörden.

Lagerung:

1. Die Lagerumgebung muss korrosionsfrei, trocken, vor Sonnenlicht geschützt, gut belüftet und sauber sein.
2. Das Produkt muss während des Transports und der Handhabung sorgfältig behandelt werden.

Lagerdauer: Unter Einhaltung der Lagerbedingungen hat das Produkt eine Lagerdauer von 5 Jahren (siehe Kennzeichnung auf dem Produkt).

Sterilisation: Ethylenoxid sterilisiert

Entsorgung: Nur für den einmaligen Gebrauch, muss dem sterilen Verfahren folgen; nach der Verwendung sollte es als biologischer Gefahrenstoff behandelt werden.

Vorsichtsmaßnahmen:

1. Überprüfen Sie bitte das Paket vor dem Gebrauch, wenn die Verpackung beschädigt oder unbeabsichtigt geöffnet sollte, nicht verwenden.
2. Überprüfen Sie das Etikett der äußeren Verpackung (Produktionsdatum und Gültigkeitsdauer) und verwenden Sie es innerhalb der Gültigkeitsdauer der Sterilisation.

Anziehanleitung:

Öffnen Sie das Paket und legen Sie die OP-Abdeckungen auf das Bett oder decken Sie den Patienten zu.

Bei OP-Abdeckungen mit Klebeband sollte das Band fest auf der Haut des Patienten haften, falls es herunterfällt. Das doppelseitige Klebeband ist 5 cm breit.

Kontakt Informationen:



DACH Schutzbekleidung GmbH & Co. KG

Rotackerstraße 21, 76437 Rastatt, Deutschland

dach-germany.de | info@dach-germany.de

Tel +49 7222 159 89-0

REF 15S01BL | IsoDrapeS / REF 15S02BL | IsoDrapeS (selbstklebend/adhesive) | Gebrauchsanweisung /




Jiangsu Medplus Non-woven Manufacturer Co., Ltd.

Address: No.217 East Wencheng Road, Economic Development Zone, Siyang,
223700 Jiangsu, P.R. China

Tel: 0086-527-80300123 Fax: 0086-021-51861120

Website: <http://www.cnmedplus.com>

The authorized representative of European Union:

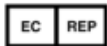


Shanghai International Holding Corp. GmbH

Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg Germany

Tel: 0049-40-2513175 Fax: 0049-40-255726

Symbole:

REF 15S01BL | IsoDrapeS / REF 15S02BL | IsoDrapeS (selbstklebend/adhesive) | Gebrauchsanweisung /

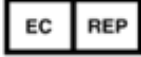	CE certified by TÜV Rheinland		Batch code
	Do not re-use		Date of manufacture
	Sterilized using ethylene oxide		Manufacturer
	Catalogue number		European union representative
	Use-by date		Consult
	Do not use if package is damaged		Caution
	Keep away from sunlight		Keep dry
	Fragile, handle with care		Importer
	Medical device		Unique device identifier
	Nicht erneut sterilisieren		Vertriebspartner

REF 15S01BL | IsoDrapeS / REF 15S02BL | IsoDrapeS (selbstklebend/adhesive) | Gebrauchsanweisung /

English

Product: Surgical drape and surgical drape (self-adhesive/adhesive)

Product name: IsoDrapeS und IsoDrapeS (selbstklebend/adhesive)

Product reference: REF 15S01BL und REF 15S02BL

Category: According to the classification criteria of MDD 93 /42 /EWG, Annex IX, this medical device is classified as Class Is. The product is used as a sterile product.

Intended purpose: Surgical Drapes are intended to be used as a protective patient covering, such as to isolate a site of surgical incision from microbial and other contamination. Disposable use.

Indication: It can be used to protect clinical medical staff during operation

Contraindication: none

Intended user: Medical staff

Use:

- Suitable for single use.
- Used drapes are considered contaminated
- Do not clean or disinfect
- Product are sterile

Incident notification: In the event of adverse reactions or serious events during the use of the device, contact the manufacturer, importer on the device label or contact the local authority.

Storage:

1. The storage environment shall be kept non-corrosive gases, dry, avoiding sunlight, well-ventilated conditions, and clean.
2. The device shall be taken care during transportation and handling.

Storage period: If the storage conditions are observed the product has a storage period of 5 years (see labelling on the product).

Sterilization: Ethylene oxide sterilized

Disposal: Single-use only, must follow the sterile operation process; After use, should be treated as biohazard.

Precautions:

Please check the package before use, if the package should be damaged or accidentally opened, do not use.

Check the label of the outer package (production date and validity period) and use within the validity period of sterilisation.

Dressing instructions:

Open the package, then put the surgical drapes on the bed or cover the patient. For the surgical drapes with adhesive tape, we should make the tape stick to patient skin tightly in case of any dropping.

Contact information:



DACH Schutzbekleidung GmbH & Co. KG

Rotackerstraße 21, 76437 Rastatt, Deutschland

dach-germany.de | info@dach-germany.de

Tel +49 7222 159 89-0

REF 15S01BL | IsoDrapeS / REF 15S02BL | IsoDrapeS (selbstklebend/adhesive) | Gebrauchsanweisung /




Jiangsu Medplus Non-woven Manufacturer Co., Ltd.

Address: No.217 East Wencheng Road, Economic Development Zone, Siyang,
223700 Jiangsu, P.R. China

Tel: 0086-527-80300123 Fax: 0086-021-51861120

Website: <http://www.cnmedplus.com>

The authorized representative of European Union:

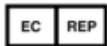


Shanghai International Holding Corp. GmbH

Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg Germany

Tel: 0049-40-2513175 Fax: 0049-40-255726

Symbols:

REF 15S01BL | IsoDrapeS / REF 15S02BL | IsoDrapeS (selbstklebend/adhesive) | Gebrauchsanweisung /

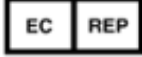	CE certified by TÜV Rheinland		Batch code
	Do not re-use		Date of manufacture
	Sterilized using ethylene oxide		Manufacturer
	Catalogue number		European union representative
	Use-by date		Consult
	Do not use if package is damaged		Caution
	Keep away from sunlight		Keep dry
	Fragile, handle with care		Importer
	Medical device		Unique device identifier
	Nicht erneut sterilisieren		Vertriebspartner